

Universidade Federal de Minas Gerais

Escola de Engenharia

Laboratório de Sistemas I — PLSI

Prof. Diogo Batista de Oliveira

Eco-Dispenser Inteligente

Sistema Automatizado de Dispensação de Medicamentos

Relatório Final

Felippe Veloso Marinho

Igor Braga de Lima

José Santos Queiroz

Luiz Daniel de Lima Pião

Raissa Gonçalves Diniz

Belo Horizonte, maio de 2026

Sumário

Resumo	3
1 Introdução	4
1.1 Contexto	4
1.2 Problema	4
1.3 Objetivos	4
2 Descrição do Sistema	5
2.1 Visão Geral	5
2.2 Público-Alvo e Contexto de Uso	5
2.3 Funcionalidades Principais	5
2.4 Componentes de Hardware	6
2.5 Casos de Uso	6
3 Arquitetura do Sistema	7
3.1 Visão em Camadas	7
3.2 Descrição dos Módulos	7
3.3 Fluxo de Comunicação Típico	8
4 Implementação	9
4.1 Firmware (ESP32-C3)	9
4.2 Backend (FastAPI)	9
4.3 Frontend (React)	10
4.4 Banco de Dados	10
4.5 Orquestração com Docker Compose	10
5 Validação de Requisitos	11
5.1 Metodologia	11
5.2 Resumo dos Resultados	11
5.3 Detalhamento dos Casos de Teste	12
5.3.1 TC01 — Modo de Operação Normal (Alertas Sonoros e Visuais) . .	12
5.3.2 TC02 — Modo de Operação Normal (Alertas Não-Sonoros / Silen-	
cioso)	12
5.3.3 TC03 — Modo de Reabastecimento	13
5.3.4 TC04 — Dispensação de Comprimido Único	13
5.3.5 TC05 — Dispensação no Horário Agendado	13
5.3.6 TC06 — Confirmação de Retirada	14
5.3.7 TC07 — Integridade Estrutural do Slot de Retirada	14
5.3.8 TC08 — Alerta de Código Ativado em Horário Configurado	15

5.3.9	TC09 — Notificação ao Cuidador/Médico Associado	15
5.3.10	TC10 — Conectividade: Controlador Alcança Servidor	16
5.3.11	TC11 — Ajuste de Volume do Alerta Sonoro	16
5.3.12	TC12 — Capacidade Mínima de 21 Slots	16
5.3.13	TC13 — Resistência a Quedas	17
5.3.14	TC14 — Peso do Dispositivo Inferior a 1 kg	17
5.3.15	TC15 — Esforço de Abertura da Gaveta	17
6	Análise Ética	19
6.1	Impactos Positivos	19
6.2	Riscos e Mitigações	19
7	Histórico do Ciclo de Vida	20
8	Avaliação do Modelo Cascata	21
8.1	O que Funcionou	21
8.2	Dificuldades	21
8.3	Adequação do Modelo	21
9	Entregas Realizadas e Não Realizadas	22
10	Conclusão e Trabalhos Futuros	24
10.1	Conclusão	24
10.2	Trabalhos Futuros	24

Resumo

O Eco-Dispenser Inteligente é um sistema embarcado de dispensação automática de medicamentos desenvolvido para promover a autonomia e a segurança de pacientes atendidos por um centro de reabilitação. O sistema é composto por um dispositivo físico baseado no microcontrolador ESP32-C3, um servidor de backend em FastAPI (Python) com banco de dados PostgreSQL, e um painel de controle web em React. O dispenser realiza a liberação de comprimidos em horários programados, emite alertas multimodais (sonoro, visual e vibratório) e registra a confirmação do paciente. Este relatório descreve a arquitetura do sistema, as decisões de implementação, a validação dos requisitos por meio de casos de teste e uma análise crítica do processo de desenvolvimento segundo o modelo cascata.

1 Introdução

1.1 Contexto

O Centro de Reabilitação objeto deste projeto atende pacientes encaminhados por unidades básicas de saúde para serviços de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. O perfil dos pacientes é heterogêneo: incluem pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), deficiências físicas e sensoriais (visuais e auditivas), membros amputados, e sequelas neurológicas como acidente vascular cerebral (AVC) e paralisia cerebral, abrangendo todas as faixas etárias, de bebês a idosos.

O centro não administra medicamentos em suas instalações. Os pacientes e seus cuidadores são responsáveis pelo regime medicamentoso em casa, o que cria desafios significativos: esquecimento de doses, erros de horário, dificuldade de manipulação de embalagens convencionais e ausência de feedback ao cuidador em caso de não adesão.

1.2 Problema

O principal problema identificado é a **falta de adesão ao regime medicamentoso domiciliar** por parte de pacientes com comprometimentos cognitivos, motores ou sensoriais. Para pacientes com TEA e TDAH, a rigidez de rotina e a dificuldade de lidar com alertas invasivos tornam o problema ainda mais crítico. A não adesão à medicação é uma das principais causas de internação evitável e piora de quadros clínicos crônicos.

1.3 Objetivos

Objetivo geral: Desenvolver um sistema integrado de dispensação automática de medicamentos que promova a autonomia, a segurança e a qualidade de vida de pacientes com necessidades especiais.

Objetivos específicos:

- Implementar um mecanismo físico de dispensação controlada por software;
- Criar um sistema de alertas multimodal acessível (sonoro, visual e vibratório) com modo silencioso;
- Desenvolver uma interface web de configuração de horários e monitoramento;
- Garantir notificação ao cuidador em caso de não confirmação pelo paciente;
- Registrar histórico de adesão para acompanhamento clínico.

2 Descrição do Sistema

2.1 Visão Geral

O Eco-Dispenser Inteligente é um dispositivo de mesa composto por uma roleta com 21 compartimentos individuais, cada um destinado a armazenar a medicação de uma dispensação específica (três dispensações diárias por sete dias). O dispositivo é abastecido semanalmente pelo cuidador e opera de forma autônoma, liberando o compartimento correto nos horários pré-configurados e emitindo alertas até que o paciente confirme a retirada.

O sistema é dividido em quatro camadas funcionais:

1. **Hardware/Firmware:** o dispositivo físico com o microcontrolador, motor, sensores e atuadores;
2. **Backend:** servidor de API responsável pela lógica de negócio, agendamentos e proxy para o hardware;
3. **Frontend:** painel web para configuração, monitoramento e histórico;
4. **Banco de dados:** persistência de pacientes, medicamentos, agendas e registros de dispensação.

2.2 Público-Alvo e Contexto de Uso

O sistema é destinado a uso **exclusivamente residencial**. O paciente interage com o dispositivo físico para confirmar a retirada do medicamento. O cuidador (familiar, enfermeiro domiciliar ou terapeuta) configura o sistema pelo painel web e recebe notificações caso o paciente não responda dentro do prazo definido.

A diversidade do público-alvo impôs requisitos de acessibilidade rígidos: alertas não agressivos para pacientes com TEA, controle de volume do buzzer, LEDs de alta luminosidade com simbologia de período do dia (sol para manhã, sol com nuvem para tarde, lua para noite), botões físicos grandes e de fácil acionamento, e interface visual com baixa carga cognitiva.

2.3 Funcionalidades Principais

- **Dispensação automática:** liberação do slot correto no horário programado, sem manipulação manual pelo paciente;
- **Rastreamento de confirmação:** o dispositivo expõe o flag `awaiting_confirm` no GET `/status`, sinalizando ao backend quando uma dispensação está pendente de

confirmação. O backend pode — e deve — verificar esse estado antes de acionar uma nova dispensação para evitar doses duplicadas;

- **Alertas multimodais simultâneos:**

- Sonoro: buzzer com volume ajustável (modo normal);
- Visual: LED 1 para manhã (GPIO 3), LED 2 para tarde (GPIO 4), LED 3 para noite (GPIO 5);
- Vibratório: micro motor de vibração em modo silencioso;

- **Persistência dos alertas** até confirmação do paciente;

- **Confirmação pelo paciente:** botão físico (GPIO 0) ou confirmação remota via API;

- **Notificação ao cuidador:** caso o paciente não confirme em tempo determinado;

- **Registro de histórico:** cada dispensação e confirmação é registrada para acompanhamento de adesão;

- **Modo reabastecimento:** permite ao cuidador acessar os compartimentos sem acionar a lógica de dispensação.

2.4 Componentes de Hardware

Tabela 1: Componentes de hardware do Eco-Dispenser

Componente	Especificação	Peça
Microcontrolador	WiFi, 3–5V, programável	ESP32-C3 SuperMini
Motor de passo	Girar 1 slot por vez, 5V	Micro Servomotor SG90
Alerta sonoro	Mínimo 60 dB, 5V	Buzzer Ativo 5V
Alerta vibratório	Silencioso, estrutura segura	Micro Motor 3V
Alerta visual	Alta luminosidade, 3 períodos	3× LED 5mm
Botão confirmação	Tátil, grande, GPIO 0	Push Button 12×12mm
Botões de volume	GPIOs 9 e 10	Push Button 12×12mm
Alimentação	127V, até 1A	Carregador USB padrão

2.5 Casos de Uso

Os casos de uso do sistema, levantados durante a fase de modelagem, são:

1. Configurar horários de dispensação via painel web;

2. Receber alerta de dispensação (sonoro, visual ou vibratório);
3. Confirmar tomada de medicamento (botão físico ou API);
4. Reabastecer o dispenser (modo reabastecimento);
5. Receber notificação de não adesão (cuidador);
6. Registrar dose no histórico;
7. Visualizar histórico de adesão.

3 Arquitetura do Sistema

3.1 Visão em Camadas

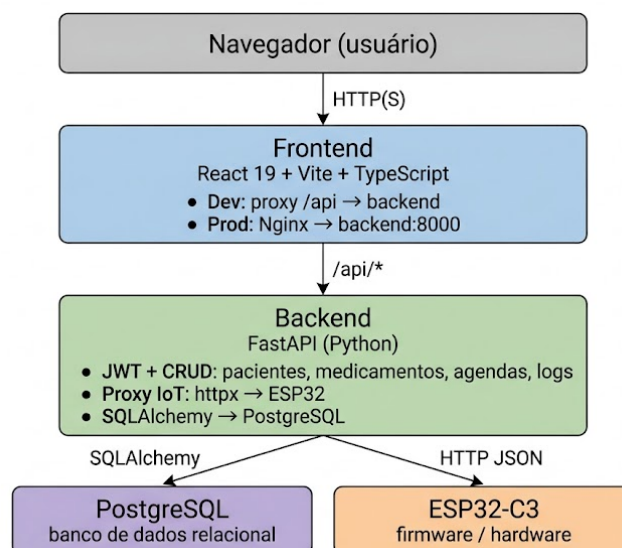


Figura 1: Arquitetura em camadas do Eco-Dispenser

3.2 Descrição dos Módulos

Firmware (ESP32-C3): servidor HTTP assíncrono rodando diretamente no micro-controlador. Expõe uma API REST que o backend consome para acionar o hardware e consultar o estado do dispositivo. Opera em rede WiFi local.

Backend (FastAPI): servidor Python que atua como intermediário entre o frontend e o hardware. Gerencia autenticação JWT, persiste dados de pacientes, medicamentos, agendamentos e logs, e faz proxy de requisições IoT para o firmware via cliente HTTP assíncrono (`httpx`).

Frontend (React): painel web responsivo para configuração de horários, monitoramento em tempo real do estado do dispenser e visualização do histórico de adesão. Comunica-se exclusivamente com o backend via prefixo `/api`.

Banco de Dados (PostgreSQL): armazenamento relacional com schema inicializado via `database/init.sql`. Os modelos são gerenciados pelo SQLAlchemy no backend.

3.3 Fluxo de Comunicação Típico

1. O cuidador acessa o painel web e configura um agendamento de dispensação.
2. No horário configurado, o backend envia `POST /dispense` ao firmware com o período e modo de alerta.
3. O firmware avança a roleta (servo SG90), acende o LED do período e dispara o alerta (buzzer ou vibração).
4. O paciente retira o medicamento e pressiona o botão de confirmação (ou o cuidador confirma remotamente).
5. O firmware registra a confirmação; o backend persiste o log no banco de dados.
6. Se não houver confirmação dentro do prazo, o backend notifica o cuidador.

4 Implementação

4.1 Firmware (ESP32-C3)

O firmware foi desenvolvido em C++ utilizando o Arduino IDE com o core ESP32 versão **2.0.17** (versões 3.x são incompatíveis com as bibliotecas assíncronas utilizadas). As bibliotecas principais são **ESPAsyncWebServer** e **AsyncTCP**.

A API HTTP exposta pelo firmware possui os seguintes endpoints:

Tabela 2: Endpoints da API do firmware

Método	Rota	Descrição
GET	<code>/status</code>	Retorna estado completo do dispositivo
POST	<code>/dispense</code>	Avança roleta e dispara alertas
POST	<code>/confirm</code>	Confirma retirada e limpa alertas
POST	<code>/calibrate</code>	Reseta roleta para o slot 0
GET	<code>/</code>	Página HTML de diagnóstico

O endpoint `GET /status` retorna um JSON com os campos: `current_slot`, `total_slots` (fixo em 21), `awaiting_confirm`, `last_confirmed_slot`, `wifi_rssi` e `uptime_s`.

O `POST /dispense` aceita `{"period": "morning"|"afternoon"|"night", "silent_mode": bool}` e controla qual alerta é disparado. O parsing do JSON é feito manualmente, sem a biblioteca `ArduinoJson`, por incompatibilidades de versão encontradas durante o desenvolvimento.

A credencial WiFi é armazenada em `firmware/eco-dispenser/secrets.h`. O backend localiza o dispositivo pelo endereço IP configurado na variável de ambiente `ESP32_IP`. A descoberta automática do IP via mDNS está planejada como trabalho futuro.

4.2 Backend (FastAPI)

O backend é uma aplicação Python com o framework **FastAPI** e servidor ASGI **Uvicorn**. O gerenciamento de pacotes usa **uv**. As rotas são organizadas por domínio:

- `/api/auth` — autenticação (registro, login, perfil) com JWT;
- `/api/iot` — proxy para o hardware (status, LED, eventos, heartbeat);
- `/api/patients` — CRUD de pacientes;
- `/api/medications` — CRUD de medicamentos;
- `/api/schedules` — gerenciamento de agendamentos;

- `/api/logs` — histórico de dispensações;
- `/api/dispensers` — gerenciamento de dispositivos;
- `/api/health` — verificação de saúde e alcançabilidade do ESP32.

A comunicação com o firmware é feita via `httpx.AsyncClient` com `base_url = http://{ESP32_IP}`. Uma decisão técnica importante foi utilizar `127.0.0.1` em vez de `localhost` para evitar problemas de resolução IPv6 no ambiente de desenvolvimento.

4.3 Frontend (React)

O frontend é uma *Single Page Application* (SPA) em **React 19** com **Vite** como ferramenta de build e **TypeScript**. O gerenciador de pacotes é exclusivamente o **Bun** (versão $\geq 1.3.13$), que substitui npm/yarn por oferecer melhor desempenho e suporte nativo a TypeScript.

As principais páginas são: autenticação (login), painel de controle, gestão de pacientes e gestão de dispensers. O design segue o **Pillar Design System** com estilo glassmorfismo, priorizando acessibilidade visual.

Em desenvolvimento, as requisições ao prefixo `/api` são redirecionadas ao backend via proxy configurado no `vite.config.ts`. Em produção, o Nginx realiza o mesmo roteamento. O linting e a formatação utilizam **Biome** (substituto unificado de ESLint e Prettier).

4.4 Banco de Dados

O banco de dados é o **PostgreSQL 16**. O schema inicial é provisionado via `database/init.sql` na primeira inicialização do volume Docker. Os modelos de domínio são definidos em **SQLAlchemy** e incluem entidades para usuários, pacientes, medicamentos, agendamentos, dispensers e logs de dispensação.

4.5 Orquestração com Docker Compose

Tabela 3: Serviços Docker Compose e perfis

Serviço	Tecnologia	Porta (host)	Perfil
db	PostgreSQL 16	5433	sempre ativo
backend	FastAPI/Uvicorn	8000	sempre ativo
frontend	Nginx + build Bun	8080	prod
frontend-dev	Vite + Bun	80	dev

5 Validação de Requisitos

5.1 Metodologia

A validação dos requisitos foi conduzida por meio de **casos de teste** derivados dos requisitos funcionais e físicos levantados nas práticas anteriores e modelados no Visual Paradigm. Cada caso de teste especifica pré-condições, passos de execução, resultado esperado e resultado obtido.

Os possíveis status de cada caso de teste são:

- **Aprovado** — comportamento observado corresponde ao resultado esperado;
- **Parcialmente Testado** — componente de software verificado; comportamento físico não validado;
- **Não Realizado** — teste não executado por ausência de hardware ou funcionalidade não implementada.

5.2 Resumo dos Resultados

ID	Caso de Teste	Status
TC01	Modo de operação normal (alertas sonoros e visuais)	Aprovado
TC02	Modo de operação normal (alertas não-sonoros/silencioso)	Parcialmente Testado
TC03	Modo de reabastecimento	Não Realizado
TC04	Dispensação de comprimido único	Não Realizado
TC05	Dispensação no horário agendado	Parcialmente Testado
TC06	Confirmação de retirada	Aprovado
TC07	Integridade estrutural do slot de retirada	Não Realizado
TC08	Alerta de código ativado em horário configurado	Parcialmente Testado
TC09	Notificação ao cuidador/médico associado	Não Realizado
TC10	Conectividade: controlador alcança servidor	Aprovado
TC11	Ajuste de volume do alerta sonoro	Não Realizado
TC12	Capacidade mínima de 21 slots	Aprovado
TC13	Resistência a quedas	Não Realizado
TC14	Peso do dispositivo inferior a 1 kg	Não Realizado
TC15	Esforço de abertura da gaveta $\leq 0,2$ kgf	Não Realizado

Tabela 4: Resumo dos casos de teste

5.3 Detalhamento dos Casos de Teste

5.3.1 TC01 — Modo de Operação Normal (Alertas Sonoros e Visuais)

Pré-condição	Dispositivo ligado, conectado ao WiFi, slot em posição inicial após calibração.
Passos	1. Enviar POST /dispense com <code>silent_mode: false</code> e <code>period: "morning"</code>. 2. Verificar que o servo avança um slot. 3. Verificar que o LED de manhã (GPIO 3) acende. 4. Verificar que o buzzer emite bipes audíveis.
Resultado esperado	Os remédios são dispensados; alertas sonoros e visuais são ativados simultaneamente.
Resultado obtido	Endpoint retornou HTTP 200 com <code>success: true</code> . Validação física realizada em 23/05/2026: LED de manhã (GPIO 3) acendeu corretamente, buzzer emitiu 3 bipes audíveis no modo normal. Avanço do servo verificado via <code>current_slot</code> .
Status	Aprovado

5.3.2 TC02 — Modo de Operação Normal (Alertas Não-Sonoros / Silencioso)

Pré-condição	Dispositivo ligado e conectado ao WiFi.
Passos	1. Enviar POST /dispense com <code>silent_mode: true</code> e <code>period: "night"</code>. 2. Verificar que o servo avança um slot. 3. Verificar que o motor de vibração pulsa por aproximadamente 600 ms. 4. Verificar que o buzzer permanece silencioso.
Resultado esperado	Os remédios são dispensados; alerta vibratório é ativado sem emissão de som.
Resultado obtido	Endpoint retornou HTTP 200 com <code>success: true</code> . Comportamento físico do motor não verificado por ausência de hardware.
Status	Parcialmente Testado

5.3.3 TC03 — Modo de Reabastecimento

Pré-condição Dispositivo em modo de operação normal.

Passos

1. Ativar o modo de reabastecimento via interface.
2. Tentar abrir os compartimentos manualmente.
3. Verificar que os slots não se movem durante a manipulação.
4. Sair do modo de reabastecimento e configurar modo desejado.

Resultado esperado

Compartimentos acessíveis sem acionamento de dispensação; ao sair do modo, sistema opera normalmente.

Resultado obtido Não realizado. A interface de alternância para o modo de reabastecimento não foi implementada na versão atual.

Status Não Realizado

5.3.4 TC04 — Dispensação de Comprimido Único

Pré-condição Todos os slots abastecidos com pelo menos um comprimido.

Passos

1. Enviar POST /dispense para acionar uma dispensação.
2. Verificar fisicamente que apenas um comprimido é dispensado.
3. Verificar que os comprimidos corretos chegam ao slot de retirada.

Resultado esperado

Apenas um comprimido dispensado por interação; compartimento correto aberto.

Resultado obtido Não realizado. O firmware controla o servo corretamente por software, mas a verificação do comprimido físico exige o dispositivo montado.

Status Não Realizado

5.3.5 TC05 — Dispensação no Horário Agendado

Pré-condição Backend em execução; agendamento configurado para horário X.

Passos

1. Configurar um agendamento de dispensação para horário X via frontend.
2. Aguardar o horário X.

3. Verificar que o backend envia `POST /dispense` ao firmware.
4. Verificar que o alerta é ativado com as configurações corretas.

Resultado esperado

A medicação do slot esperado é dispensada no horário X com os alertas configurados.

Resultado obtido O endpoint `/dispense` funciona corretamente quando acionado manualmente. O disparo automático pelo backend em horário agendado não foi validado em ambiente integrado completo.

Status **Parcialmente Testado**

5.3.6 TC06 — Confirmação de Retirada

Pré-condição Uma dispensação foi executada; `awaiting_confirm` é `true`.

- Passos**
1. Enviar `POST /confirm` ao firmware.
 2. Verificar que `awaiting_confirm` passa a `false` em `GET /status`.
 3. Verificar que `confirmed_slot` corresponde ao slot dispensado.

Resultado esperado

Confirmação registrada, alertas limpos, estado atualizado.

Resultado obtido Teste executado com sucesso via suíte `pytest`. `POST /confirm` retornou `HTTP 200`; `GET /status` confirmou `awaiting_confirm: false` e `confirmed_slot` correto.

Status **Aprovado**

5.3.7 TC07 — Integridade Estrutural do Slot de Retirada

Pré-condição Dispositivo fisicamente montado.

- Passos**
1. Abrir manualmente o slot de retirada; verificar que o compartimento se abre e mantém integridade.
 2. Durante uma dispensação, verificar que os demais slots permanecem fechados.
 3. Simular turbulência; verificar que os slots não abrem inadvertidamente.

Resultado esperado

Apenas o slot ativo abre; demais permanecem fechados sob turbulência.

Resultado obtido Não realizado. Exige o dispositivo físico montado com a estrutura da roleta.

Status Não Realizado

5.3.8 TC08 — Alerta de Código Ativado em Horário Configurado

Pré-condição Firmware em execução; agendamento configurado para horário X.

Passos

1. Agendar alerta para horário X com configurações de sinal específicas.
2. Verificar que o alerta é ativado em X com as configurações corretas.

Resultado esperado

O alerta é ativado exatamente no horário X com o período e modo corretos.

Resultado obtido A lógica de alerta do firmware foi testada via API: `POST /dispense` ativa o alerta corretamente com as configurações enviadas. O disparo automático por agendamento do backend não foi validado em integração completa.

Status Parcialmente Testado

5.3.9 TC09 — Notificação ao Cuidador/Médico Associado

Pré-condição Paciente associado a cuidador e médico no sistema; dispensação sem confirmação.

Passos

1. Verificar que a notificação chega ao cuidador e médico *associados* ao paciente.
2. Verificar que a notificação *não* chega a usuários não associados.

Resultado esperado

Somente os responsáveis vinculados ao paciente recebem a notificação.

Resultado obtido Não realizado. A integração com o serviço de notificações push (Firebase Cloud Messaging) não foi implementada na versão atual.

Status Não Realizado

5.3.10 TC10 — Conectividade: Controlador Alcança Servidor

Pré-condição ESP32 conectado ao WiFi; computador de teste na mesma rede.

Passos

1. Executar `GET /status` no endereço IP do ESP32; verificar resposta HTTP 200.
2. Executar dois `GET /status` com intervalo de 2 s; verificar que `uptime_s` aumentou.
3. Verificar que `wifi_rssi` está entre -100 dBm e 0 dBm.

Resultado esperado

Servidor HTTP do firmware responde corretamente; uptime cresce; RSSI válido.

Resultado obtido Todos os testes de conectividade da suíte pytest passaram: `test_esp32_respon`
`test_uptime_aumenta_com_tempo` e `test_rssi_dentro_do_esperado`.

Status **Aprovado**

5.3.11 TC11 — Ajuste de Volume do Alerta Sonoro

Pré-condição Dispositivo físico montado; buzzer em operação.

Passos

1. Com volume em 0%, pressionar `BTN_VOL_UP` (GPIO 9).
2. Verificar que o volume do alerta passa a ser audível (equivalente a 20%).

Resultado esperado

O alerta passa a emitir som após o ajuste.

Resultado obtido Não realizado. O ajuste de volume é exclusivamente por botão físico; não há endpoint HTTP para esse controle. O dispositivo físico não estava disponível.

Status **Não Realizado**

5.3.12 TC12 — Capacidade Mínima de 21 Slots

Pré-condição Firmware em execução.

Passos

1. Executar `GET /status`.
2. Verificar que o campo `total_slots` é maior ou igual a 21.

Resultado esperado

O dispenser possui ao menos 21 reservatórios (3 dispensações/dia × 7 dias).

Resultado obtido GET /status retornou total_slots: 21. Confirmado pelo teste automatizado test_total_slots_e_sempre_21.

Status **Aprovado**

5.3.13 TC13 — Resistência a Quedas

Pré-condição Dispositivo fisicamente montado e abastecido.

Passos

1. Simular queda do dispositivo de altura equivalente ao uso doméstico (bancada).
2. Verificar integridade estrutural e funcional após o impacto.

Resultado esperado

O dispenser não quebra e mantém funcionalidade após queda leve.

Resultado obtido Não realizado. Exige o dispositivo físico completo.

Status **Não Realizado**

5.3.14 TC14 — Peso do Dispositivo Inferior a 1 kg

Pré-condição Dispositivo fisicamente montado e abastecido com comprimidos.

Passos

1. Pesar o dispositivo em balança.
2. Verificar que o resultado é inferior a 1 kg.

Resultado esperado

Peso < 1 kg para garantir portabilidade, especialmente para idosos.

Resultado obtido Não realizado. O dispositivo físico completo não estava disponível.

Status **Não Realizado**

5.3.15 TC15 — Esforço de Abertura da Gaveta

Pré-condição Dispositivo fisicamente montado com mecanismo de gaveta.

Passos

1. Medir a força de abertura da gaveta com dinamômetro.
2. Verificar que não excede 0,2 kgf.
3. Repetir para o fechamento.

Resultado esperado

Força de abertura e fechamento $\leq 0,2$ kgf, garantindo acessibilidade a pacientes com força reduzida.

Resultado obtido Não realizado. Exige o dispositivo físico e um dinamômetro.

Status Não Realizado

6 Análise Ética

6.1 Impactos Positivos

O Eco-Dispenser endereça diretamente a autonomia de pacientes com limitações cognitivas e motoras. Os principais benefícios identificados são:

- **Autonomia e dignidade:** o paciente gerencia sua própria medicação sem auxílio constante;
- **Segurança:** o flag de confirmação pendente e os alertas persistentes reduzem o risco de dose esquecida; o backend pode usar esse estado para evitar dispensações duplicadas;
- **Redução de carga sobre cuidadores:** notificados apenas quando necessário, sem supervisão contínua;
- **Registro clínico objetivo:** o histórico de adesão fornece dados para o acompanhamento terapêutico;
- **Acessibilidade como requisito central:** o design multimodal foi definido com base no perfil heterogêneo dos usuários, não como funcionalidade adicional.

6.2 Riscos e Mitigações

- **Falha de dispensação:** uma falha de hardware pode resultar em dose não administrada. *Mitigação:* alertas redundantes (sonoro + visual + vibratório), registro de falhas em log e calibração física pelo cuidador;
- **Privacidade de dados de saúde:** o sistema armazena dados sensíveis de pacientes vulneráveis. *Mitigação:* autenticação JWT, dados trafegados em rede local, acesso restrito por perfil de usuário;
- **Dependência tecnológica:** falha de energia ou rede interrompe o sistema. *Mitigação prevista:* modo de operação offline com alertas físicos mesmo sem conectividade ao backend (trabalho futuro);
- **Erro de configuração pelo cuidador:** configurações erradas podem comprometer o tratamento. *Mitigação:* interface simplificada com confirmação de agendamentos e validação de dados no backend.

7 Histórico do Ciclo de Vida

O projeto foi desenvolvido segundo o modelo cascata. A Tabela 5 apresenta as entregas realizadas ao longo do semestre.

Tabela 5: Histórico de entregas — modelo cascata

Fase	Entrega	Período	Status
Requisitos	Entrevista com stakeholders e levantamento (Lab 1)	2026/1	Concluído
Requisitos	Especificação estruturada de requisitos (Prática 2)	2026/1	Concluído
Projeto	Seleção de componentes e modelagem no Visual Paradigm (Prática 6)	2026/1	Concluído
Implementação	Firmware: servidor HTTP, servo, alertas	2026/1	Concluído
Implementação	Backend: FastAPI, proxy IoT, CRUD, JWT	2026/1	Concluído
Implementação	Frontend: dashboard React	2026/1	Concluído
Implementação	Banco de dados: schema PostgreSQL	2026/1	Concluído
Implementação	Orquestração Docker Compose	2026/1	Concluído
Implementação	Notificações push (Firebase)	2026/1	Não realizado
Implementação	Descoberta automática do ESP (mDNS)	2026/1	Em andamento
Testes	Testes HTTP automatizados do firmware (pytest)	2026/1	Parcial
Testes	Testes físicos de hardware	2026/1	Não realizado
Entrega Final	Relatório + vídeo + apresentação	2026/1	Em andamento

8 Avaliação do Modelo Cascata

8.1 O que Funcionou

O modelo cascata trouxe benefícios concretos na fase inicial. A obrigatoriedade de documentar requisitos antes de qualquer implementação levou a entrevistas estruturadas com o centro de reabilitação e a uma especificação detalhada do público-alvo. Isso evitou decisões de design inconsistentes — o requisito de modo silencioso, por exemplo, surgiu das entrevistas e não seria evidente sem esse processo.

A separação em fases com entregas definidas também facilitou a divisão de responsabilidades na equipe: firmware, backend, frontend e banco de dados foram desenvolvidos com contratos de interface claros.

8.2 Dificuldades

- **Requisitos evolutivos:** o problema de descoberta dinâmica do ESP na rede surgiu apenas durante a integração, quando firmware e backend já estavam implementados com IP fixo;
- **Integração tardia:** como cada módulo foi desenvolvido isoladamente, problemas de integração (proxy, formato JSON, CORS) apareceram somente ao final, aumentando o custo de correção;
- **Testes físicos dependentes de hardware:** a fase de testes foi limitada pela indisponibilidade do dispositivo físico completo, algo que o modelo cascata não prevê mecanismos para tratar;
- **Dificuldade de retorno:** quando uma decisão técnica se mostrou inadequada (core ESP32 3.x incompatível com as bibliotecas assíncronas), o modelo cascata dificultou a revisão estruturada.

8.3 Adequação do Modelo

Para um projeto de sistema embarcado com componentes de hardware e software tão interdependentes, um modelo iterativo com ciclos curtos de integração seria provavelmente mais eficaz. O modelo cascata funcionou melhor na fase de requisitos do que nas fases de implementação e testes.

9 Entregas Realizadas e Não Realizadas

Requisito / Funcionalidade	Implementado?	Observação
Servidor HTTP no firmware	Sim	Endpoints <code>/status</code> , <code>/dispense</code> , <code>/confirm</code> , <code>/calibrate</code>
Controle do servo (roleta 21 slots)	Sim	Wrap-around após slot 21
Alerta sonoro (buzzer)	Sim	Verificado por código; físico não testado
Alerta visual (3 LEDs por pe- ríodo)	Sim	Verificado por código; físico não testado
Alerta vibratório (motor)	Sim	Verificado por código; físico não testado
Botão de confirmação física	Sim	GPIO 0; lógica imple- mentada
Botões de volume (VOL_UP/DOWN)	Sim	GPIOs 9 e 10; sem endpoint HTTP
Flag de confirmação pendente (awaiting_confirm)	Sim	Exposto via <code>/status</code> ; bloqueio de dupla dose deve ser implemen- tado no backend
Backend FastAPI com proxy IoT	Sim	Endpoints IoT funcio- nais
Autenticação JWT	Sim	Login e proteção de rotas
CRUD pacientes e medicamentos	Sim	Modelos e endpoints implementados
Agendamentos de dispensação	Sim	Disparo automático não validado em integração
Histórico de adesão (logs)	Sim	Endpoint de logs im- plementado
Frontend React (dashboard)	Sim	Páginas de login, paci- entes, dispensers
Docker Compose (dev/prod)	Sim	Perfis configurados e funcionais

Requisito / Funcionalidade	Implementado?	Observação
Notificações push ao cuidador	Não	Firestore não integrado
Descoberta automática do ESP (mDNS)	Não	Em andamento (equipe back/front)
Modo reabastecimento (UI)	Não	Lógica de hardware prevista; UI não implementada
Testes físicos do hardware	Não	Dispositivo físico completo não disponível
Operação offline (sem backend)	Não	Previsto como trabalho futuro

Tabela 6: Balanço de entregas realizadas e não realizadas

10 Conclusão e Trabalhos Futuros

10.1 Conclusão

O Eco-Dispenser Inteligente atingiu seus objetivos centrais de MVP: foi desenvolvido um sistema integrado capaz de dispensar medicamentos automaticamente, emitir alertas multimodais e registrar confirmações do paciente. O firmware do ESP32-C3 expõe uma API HTTP funcional e testada; o backend FastAPI realiza o proxy para o hardware com autenticação e persistência; o frontend React oferece uma interface de configuração e monitoramento.

As principais limitações da versão atual são a ausência de notificações push ao cuidador e a necessidade de configuração manual do endereço IP do dispositivo. Ambos os problemas têm soluções identificadas e em andamento.

10.2 Trabalhos Futuros

- **Descoberta automática do ESP (mDNS):** o firmware anunciaria o dispositivo como `eco-dispenser.local` na rede local, eliminando a configuração manual de IP;
- **Notificações push:** integração com Firebase Cloud Messaging para alertar cuidadores em caso de não adesão;
- **Testes físicos completos:** execução dos casos de teste de hardware (TC04, TC07, TC11, TC13, TC14, TC15) com o dispositivo montado;
- **Operação offline:** firmware com alertas físicos mesmo sem conectividade ao backend;
- **Modo reabastecimento:** implementação da interface e do fluxo completo de reabastecimento semanal;
- **Deploy em produção:** configuração de HTTPS e infraestrutura para uso fora da rede local.

Referências

- [1] Espressif Systems. *ESP32-C3 Series Datasheet*. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_datasheet_en.pdf. Acesso em: maio 2026.
- [2] me-no-dev. *ESPAsyncWebServer*. Disponível em: <https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer>. Acesso em: maio 2026.
- [3] Santos, R. *Getting Started with ESP32-C3 Super Mini*. Random Nerd Tutorials. Disponível em: <https://randomnerdtutorials.com/getting-started-esp32-c3-super-mini/>. Acesso em: maio 2026.
- [4] Ramírez, S. *FastAPI Documentation*. Disponível em: <https://fastapi.tiangolo.com>. Acesso em: maio 2026.
- [5] Meta Platforms. *React — The library for web and native user interfaces*. Disponível em: <https://react.dev>. Acesso em: maio 2026.
- [6] Oven. *Bun — A fast all-in-one JavaScript runtime*. Disponível em: <https://bun.sh>. Acesso em: maio 2026.
- [7] The PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 16 Documentation*. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/>. Acesso em: maio 2026.